

Podnośniki sufitowe WS 200/WS 300

Kompleksowe rozwiązania dla:

· TWOJEGO DOMU · DOMÓW OPIEKI · SZPITALI

JURAJSKA
FABRYKA
WIND ...


Radość życia bez barier

INFOLINIA: 801 90 00 88



Sufitowy zakres podnoszenia serii WS200 i WS300

Jeden unikalny zakres, sześć różnych opcji modelu. Każdy inteligentnie zaprojektowany, aby spełnić oczekiwania klienta, jak i opiekuna. Przedstawiamy gamę WS 200 i WS 300 bezpiecznych i wydajnych rozwiązań.

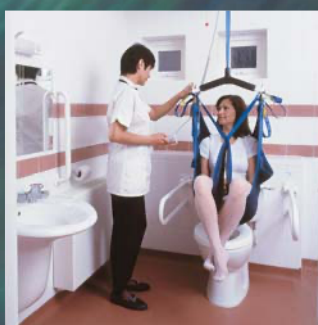

Elastyczna konstrukcja oznacza również z WS200 i WS300 można z łatwością podłączyć do sufitu lub do wolno stojącej jednostki (z zastrzeżeniem badania konstrukcyjnego miejsca).

Estetycznie zaprojektowane podnośniki zapewniają dyskretny system kontrolowanego transferu z łóżka, wózka lub podłogi.

WS200 i WS300 pasują do niemal każdego miejsca, nawet w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak multioddziały szpitalne, gdzie ograniczona przestrzeń może utrudnić korzystanie z mobilnego podnośnika.





Samodiagnostyka -
sygnał dźwiękowy, jeśli
pojawi się problem

Wolnobieżny lub napędzany silnik

Montowany do sufitu lub
wolnostojący

Estetycznie
zaprojektowana
skrzynka

+ Ogranicznik
przeciążenia

Prosty w ładowaniu

• Przejrzysty i
prosty sposób
użycia słuchawki

Wskaźnik ładowania LED
i sygnał dźwiękowy
wskazujący niski stan
baterii

▶ Miękki start / stop dla
sprawnego i
bezpiecznego
transferu na
wszystkich osiach


▲ Zmienna prędkość
na wszystkich osiach

★ Funkcja
zatrzymania
awaryjnego i
awaryjnego
opuszczania

Drażek z hakami
bezpieczeństwa i
projektem zwrotnicy

Opcja montażu X-Y
umożliwia całkowite
pokrycie pokoju.

Solidnie zaprojektowane
haki bezpieczeństwa

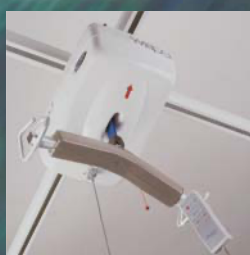

Opcje modeli i udźwig

- WS 200: 200kg
- WS 300: 272kg
- Bariatryczny model suwnicy: 445kg



- Przezroczyste sterowanie ręczne dla łatwej obsługi
- 24V dla ciągłej i niezawodnej pracy
- Opcja sterowania na podcierwień

Rzetelnie testowane

- Podnośniki WS 200/WS 300 zostały przetestowane w sekcji trwałości British Standard BS EN ISO 10535: 1998 z tysiącami testów ciągłego podnoszenia i opuszczania.

★ Zatrzymanie awaryjne i opuszczanie podnośnika

- W mało prawdopodobnych sytuacjach awarii akumulatora podnośniki zostały wyposażone w przycisk awaryjnego zatrzymania/opuszczania, które są dogodnie zlokalizowane na spodzie urządzeń. Wszystko w celu ułatwienia dostępu do bezpiecznego i kontrolowanego zejścia.
- W przeciwieństwie do innych podnośników WS 200/WS 300 posiadają osobne baterie opuszczania awaryjnego.

- Estetycznie zaprojektowana pokrywa jest dobrze zabezpieczona przez śrubę zwiększającą bezpieczeństwo urządzenia.
- + Ogranicznik przeciążenia
Zatrzymuje urządzenie gdy waga maksymalna zostanie przekroczona.

W sytuacji gdy opiekun jest rozproszony przy obsłudze urządzenia wyłącznik kręcowy zabezpiecza podniesionego pacjenta gdy zostanie podniesiony zbyt wysoko lub obniżony zbyt nisko.

Instalacja i serwis

Zespół wykwalifikowanych inżynierów może szybko zainstalować sprzęt, zapewniając obsługę i utrzymanie go dla przestrzegania przepisów.

- Wolnobieżny lub zasilany silnik oraz rozwiązanie XY dla pełnego pokrycia pomieszczenia.
- ▶ Gładki start/stop–
Podnośniki mają łagodny start/stop dla kontrolowanego ruchu i pozycjonowania.

- ▲ Zmienna prędkość- regulowana za pomocą słuchawki. Prędkość jazdy można ustawić indywidualnie dla osoby.
- Prosty w ładowaniu także podczas długich odstępów czasowych, działanie akumulatora nawet dla 250 kolejnych wyciągów z pacjentem o wadze 75kg.



Elastyczne opcje i akcesoria do toru jazdy

Talerz obrotowy: Dodaje elastyczność toru jezdnygo
Opcje modelu manualnego lub mechanicznie napędzanego.

System X-Y: Pełne pokrycie pomieszczenia.

Łuki: Dostępne w 15°, 30°, 45°/90° sekcjach.



Kompleksowy zakres temblaków/nosideł


Lekkie, o podwyższonej ognioodporności, z trwałego materiału. Dostępne rozmiary dziecięce.



Rozwiązania bariatryczne z podwojną kasetą

Bezpieczne obciążenie robocze: 445 kg.

Wolnostojące systemy bramowe.

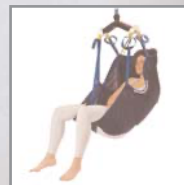

Przenosny podnosnik Wispa Lite i
układ bramowy Lite Track

Tymczasowe, awaryjne lub pół-trwałe rozwiązanie
wolnostojące. System bez instalacji. Łatwy montaż w 5
minut bez użycia narzędzi lub drabiny. 210 kg
maksymalnego obciążenia (łącznie z podnośnikiem).



Badanie, instalacja i obsługa


Zespół wykwalifikowanych inżynierów wraz z technikami
może szybko zainstalować sprzęt, zapewniając obsługę
i utrzymanie go dla przestrzegania przepisów.



Rozszerzone programy gwarancyjne

Gwarancja Supercare obejmująca pełne koszty awarii
na okres do pięciu lat.



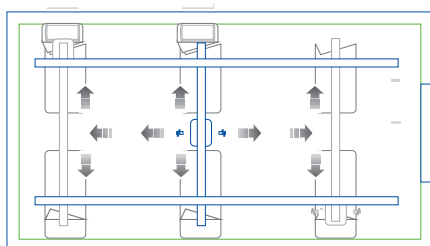

JURAJSKA
FABRYKA
WIND ...

Jurajska Fabryka Wind Kaczmarczyk Spółka Jawna
ul. Koksowa 6AB, 42-202 Częstochowa
Tel./fax: +34 314 03 10, e-mail: biuro@fabrykawind.pl lub biuro@liftplus.pl
NIP: 5732847661 KRS: 0000490001 REGON: 243435020